

kinder



kinder


Il Kinder è un kit per il prelievo di ovociti destinati all'inseminazione "in vitro" tramite tecnica FIVET o ICSI. Il dispositivo medico è usato per il prelievo transvaginale ecoguidato del gamete femminile nell'ambito di un ciclo di procreazione medicalmente assistita (PMA). Per questa manovra chirurgica è necessario un ago collegato ad un set che permette di aspirare, in un sistema chiuso e sterile, il liquido follicolare contenente gli ovociti.

Kinder is a kit for taking oocyte samples intended for "in vitro" insemination by means of FIVET or ICSI technique. The medical device is used to take ultrasound-guided transvaginal samples of the female gamete within a medically assisted procreation (MAP) cycle. This surgical operation requires a needle connected to a set in order to aspirate the follicular fluid containing the oocytes in a closed and sterile system.



Porre il tappo silconico su una apposita provetta.

Place the silicone cap on a test tube.

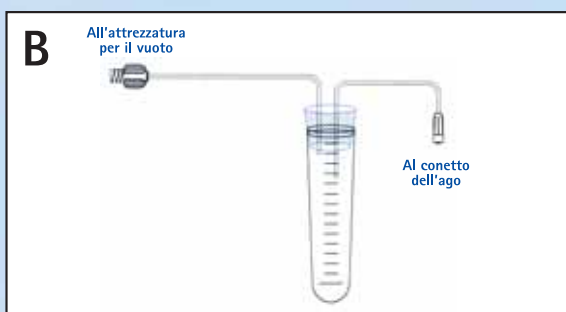


Collegare la prolunga con attacco luer femmina all'apposita attrezzatura per la creazione del vuoto.

Connect the extension with female Luer lock to the vacuum generating equipment.



Inserire tramite guida ecografica la punta dell'ago nel punto selezionato per il prelievo. La punta a becco di flauto ha lunghezza sufficiente per raggiungere i fornici e penetrare nella cavità pelvica per 5-6 cm. Il mandrino, inoltre offre rigidità all'ago ed evita l'occlusione del lume con frustoli di tessuto durante la perforazione delle pareti vaginali. Raggiunto il punto da aspirare estrarre il mandrino.

Using the ultrasound guide insert the tip of the needle at the point from where the sample is to be taken. The beaked tip is sufficiently long to reach the fornices and penetrate the pelvic cavity for 5-6 cm. The stylet moreover gives the needle rigidity and prevents occlusion of the lumen with fragments of tissue during perforation of the vaginal walls. When the point to be aspirated has been reached, extract the stylet.

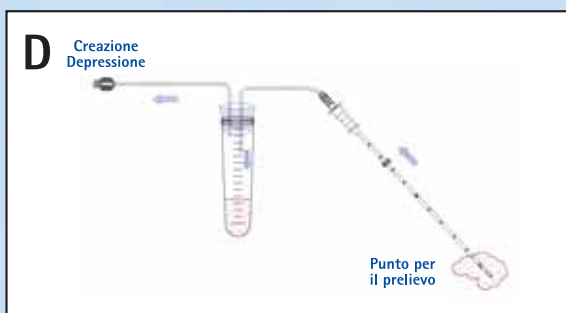

Collegare la prolunga con luer maschio al conetto dell'ago prima del prelievo. Procedere alla creazione del vuoto nella provetta ed aspirare conseguentemente il liquido follicolare.

Connect the extension with male Luer lock to the needle cone before taking the sample. Create a vacuum in the test tube and consequently aspirate the follicular fluid.

* Per gli operatori: su richiesta è possibile la realizzazione di aghi con lunghezze e diametri variabili per soddisfare le Vostre esigenze.
For the medical operators: on request needles with different lengths and diameters can be made to meet your requirements

CALIBRO GAUGE	DIAMETRO MM	28 CM	35 CM	PEZZI PER SCATOLA
16 G	1,60	KKN 1628EC	KKN 1635EC	10
17 G	1,47	KKN 1728EC	KKN 1735EC	10
18 G	1,27	KKN 1828EC	KKN 1835EC	10

di seguito al codice indicare la lunghezza della prolunga LLF e della prolunga LLM (in cm)
 following to the code add the length of LLF extension and the length of LLM extension (in cm)